

# CLICKIT ER

SISTEMA DI FISSAZIONE DI EMERGENZA

Morsetto universale

Attacco rapido

Sterile

MR Conditional



# Indicazioni

Il ClickIt ER è un sistema di fissazione esterna di emergenza MR Conditional per la stabilizzazione temporanea. Permette di eseguire il Damage Control Orthopedics generale e distrettuale in maniera rapida semplice e sicura, garantendo un'ottima stabilità.

## CARATTERISTICHE

Morsetto universale

Prechiusura manuale del morsetto

Attacco rapido

Unica chiave

Sterile

MR Conditional

## VANTAGGI

Raccorda barra/barra, barra/vite (Ø 4.0-5.0-6.0 mm) e filo di K

Rapida applicazione

Rapida applicazione

Strumentario ridotto

Pronto all'uso

Consente risonanza magnetica sino a 3 Tesla

# Componenti




## Morsetto universale


Raccorda sia le barre che gli elementi di presa



Raccordo barra/barra

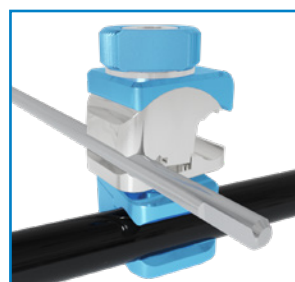

Raccordo barra/vite

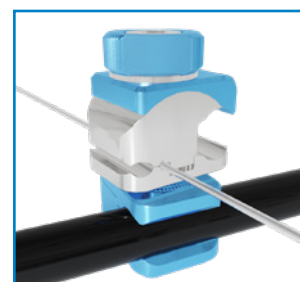

Raccordo barra/filo




## Barre

Diametro 12 mm radiotrasparente



## Morsetto Multiplo

Posizionamento facilitato di 2 o 3 viti complanari

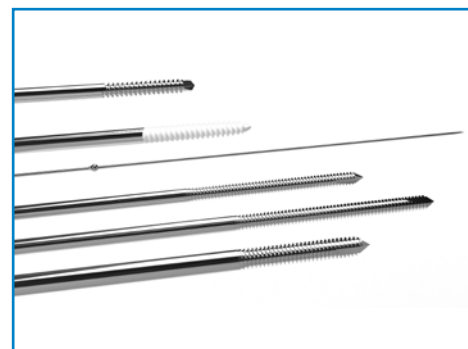

## Elementi di presa ossea



## Supporto per sistema ibrido ER


Il supporto è utile alla realizzazione di montaggi ibridi

# Schemi di montaggio

## ARTO SUPERIORE








## BACINO

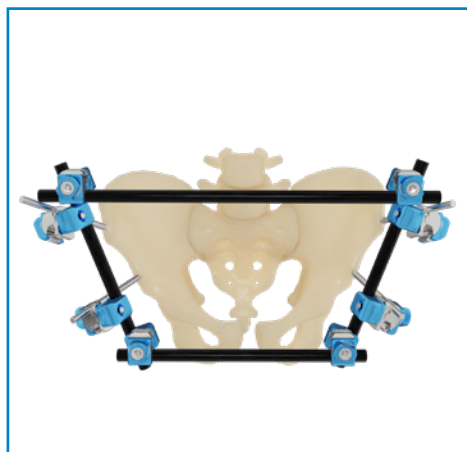

## ARTO INFERIORE



Vista laterale

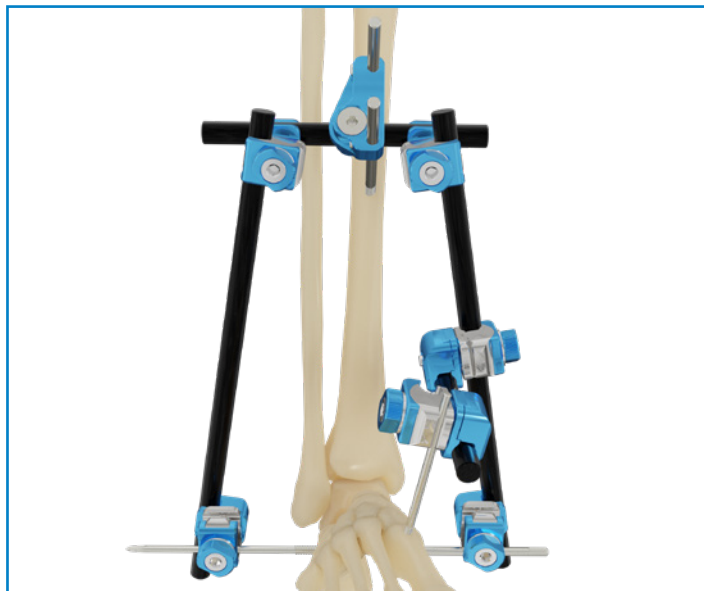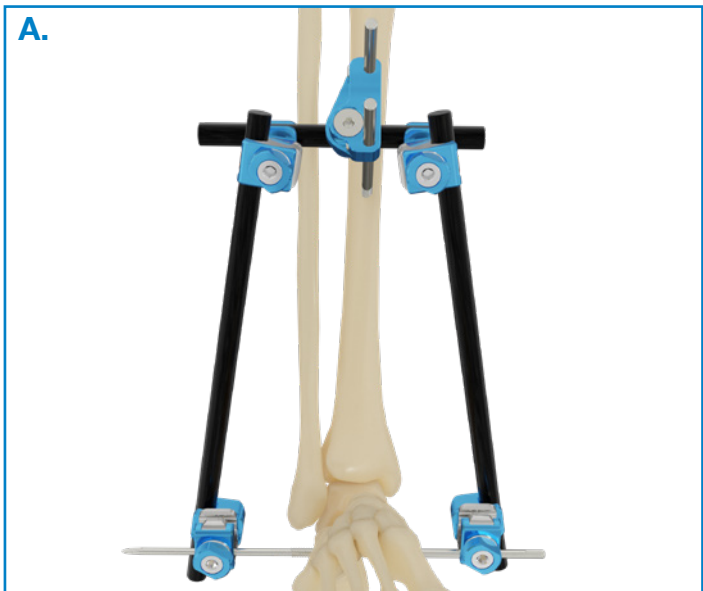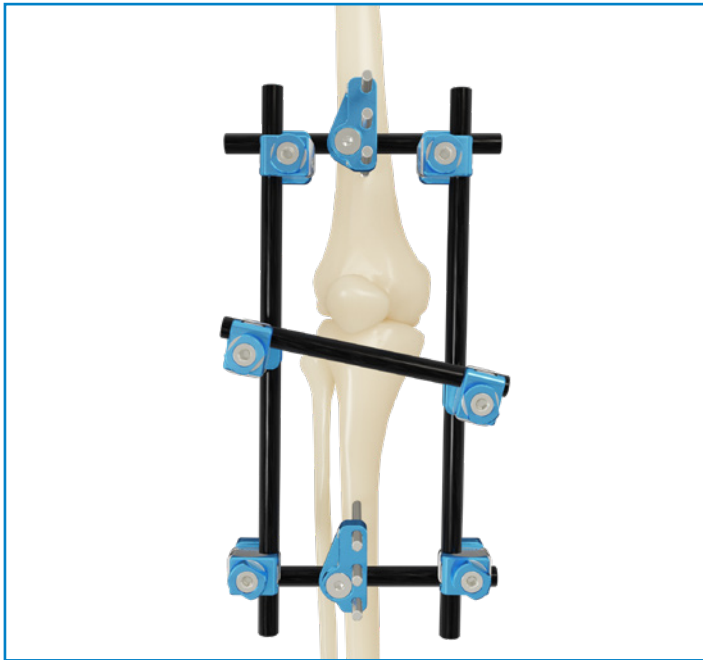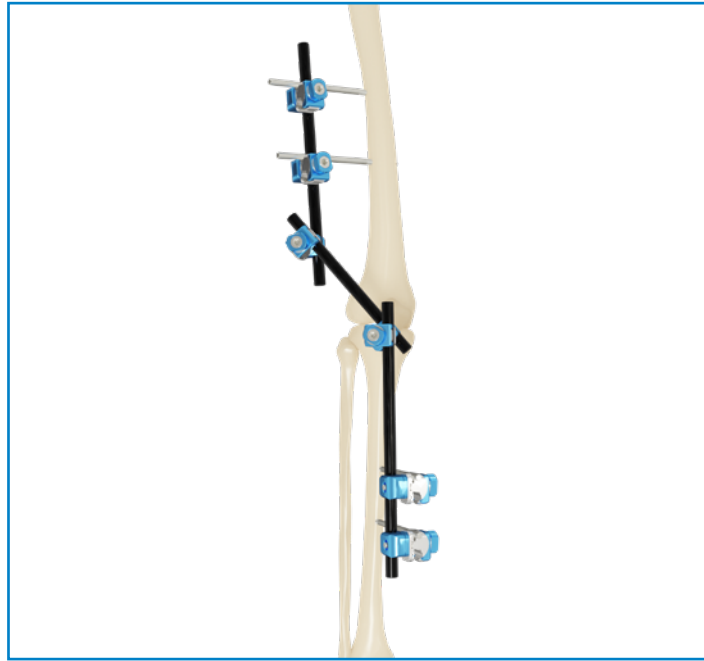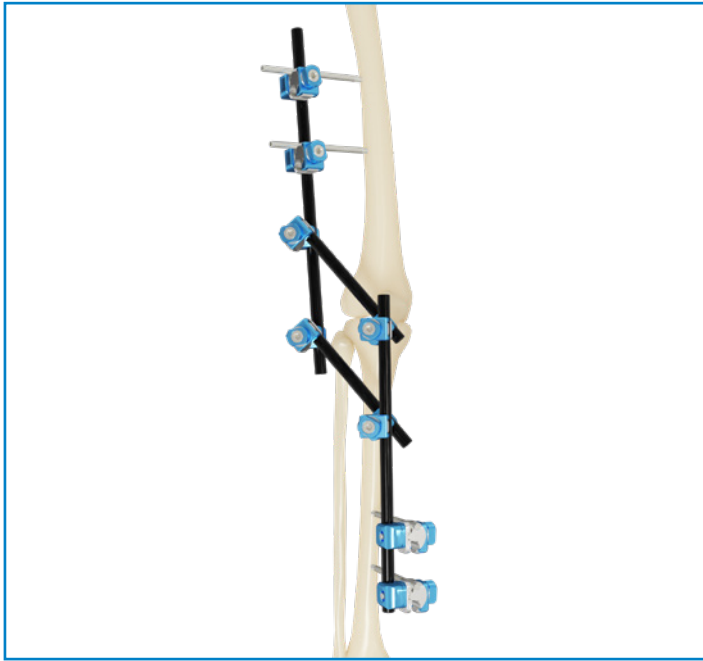



A. Montaggio realizzato con kit ER per pilone tibiale (cod. 5006600ST).

## Sterilizzazione

I componenti del sistema ClickIt ER sono forniti sterili.

Per lo strumentario si indica la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo secondo i seguenti parametri:

**TEMPERATURA:** 134°

**ESPOSIZIONE:** 10 min

# CLICKIT ER

## COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5006508ST	Morsetto universale ClickIt ER
5006504ST	Morsetto multiplo ClickIt ER
5006506ST	Supporto per sistema ibrido ClickIt ER
5006510ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 100 mm
5006512ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 150mm
5006514ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 200 mm
5006516ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 250 mm
5006518ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 300 mm
5006520ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 350 mm
5006522ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 400 mm
5006526ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 500 mm
5006528ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 600 mm
5006600ST	Kit pilone tibiale
5006600STA	Kit pilone tibiale long
5006600STB	Kit pilone tibiale plus
5006610ST	Kit pilone tibiale delta
5006620ST	Kit diafisi tibiale
5006630ST	Kit ginocchio a ponte
5006640ST	Kit diafisi femorale
5006650ST	Kit gomito trauma
5006650STA	Kit gomito trauma plus
5006660ST	Kit omero diafisario

## STRUMENTARIO \*

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562	Cassetta strumentario ClickIt ER completa	
Composta da:		
5000124	Cacciavite esagonale da 3.0 mm	1
5000600	Chiave a T per viti Ø 4.0 mm	1
5000601	Chiave a T per viti Ø 5.0 mm	1
5000602	Chiave a T per viti Ø 6.0 mm	1
5000604	Manico a T con attacco AO	1
5000605	Asta esagonale Ø 5.0 mm attacco AO	1
5006000	Chiave esagonale a L da 3.0 mm	1
5000622	Chiave esagonale a L da 5.0 mm	1
5000222	Perforatore Ø 3.5 mm	1
5000224	Perforatore Ø 4.5 mm	1
5006010	Cannula perforatore Ø 3.5 mm L 110 mm	1
5000621	Chiave a T universale	1
5006.04	Adattatore Ø 4.0 per chiave a T	1
5006.05	Adattatore Ø 5.0 per chiave a T	1
5006.06	Adattatore Ø 6.0 per chiave a T	1
5006564	Barra comparazione ClickIt ER	1
5006560ER	Cassetta strumentario ClickIt ER vuota	1

\* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE



**SEDE LEGALE**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova  
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210  
[www.mikai.it](http://www.mikai.it) - [servizio.clienti@mikai.it](mailto:servizio.clienti@mikai.it)

**PRODUZIONE**

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)  
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133  
[www.mikai.it](http://www.mikai.it) - [servizio.clienti@mikai.it](mailto:servizio.clienti@mikai.it)