


CLICKIT CF



**FISSATORE
CIRCOLARE**



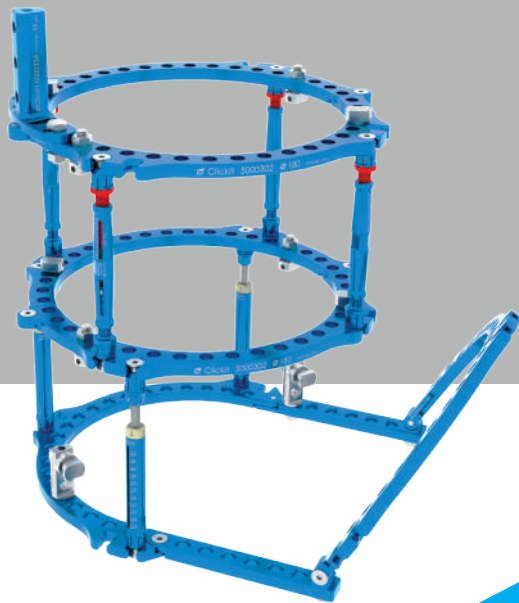

 INDICE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 4 - 7

INDICAZIONI 8

SEMIARCHI, ARCHI, SETTORI 9 - 12

BARRE 13 - 16

MORSETTI, ACCESSORI 17 - 23

ACCESSORI ARCHI PIEDE, VITI STERILI, STRUMENTARIO 24 - 26

NOTE 27

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Realizzato in lega di alluminio e acciaio AISI 316L
 - Leggero, resistente, stabile e compatibile con la risonanza (sino a 1,5 T)
- Barre ad attacco rapido con vite a scomparsa
 - Assemblaggio semplice e rapido. Tutti i fori dell'anello sono liberi per il posizionamento degli elementi di presa
- Dotato di barre fisse e mobili
 - Le mobili consentono una rapida e mirata compressione/distrazione
- Morsetto per vite singola unico
 - Adatto per vari \emptyset di vite ossea (4, 5, 6mm)

QUANDO LA TECNOLOGIA SEMPLIFICA UN SISTEMA


- Morsetto fissafili con testa forata
 - Facilmente bloccabile anche in presenza di altri elementi in prossimità del morsetto
- Morsetto a 2 e 3 viti con asole sulla base
 - Consente sempre di orientare in modo ottimale le viti nell'osso
- Sterile
 - Pronto all'uso
- Compatibile con gli altri sistemi circolari più diffusi (smith&nephew, orthofix...)
 - Possibile uso di componenti già in dotazione



Lo snodo arco piede permette di orientare in maniera ottimale l'arco di stabilizzazione anteriore.



Le barre ad attacco rapido si raccordano su una porzione esterna all'anello mediante una vite con testa a scomparsa e consentono anche una correzione angolare parziale.

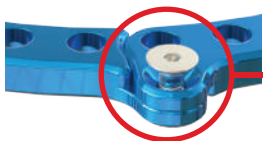

Il raccordo tra i due semiarchi avviene in una porzione esterna agli archi e con viti con testa a scomparsa.



Il supporto nella parte anteriore presenta un foro filettato per potere inserire altri supporti e/o accessori per aumentare la modularità del sistema.

La base dei supporti presenta una sezione maggiorata per garantire una migliore stabilità e resistenza alla flessione del supporto stesso.



La testa del fissafilo presenta un foro per facilitare il bloccaggio sull'anello usando un perno da 3 mm nel foro stesso. Il bloccaggio con questa modalità è particolarmente utile nei casi in cui non si riesca a usare la classica chiave piana per tenere fissa la testa del fissafili.

INDICAZIONI

Applicazioni tradizionali della fissazione esterna.


Le applicazioni si indirizzano prevalentemente negli arti inferiori, in particolare nella tibia:

1. Traumatologia: prevalentemente il piatto e il pilone tibiale
2. Trattamento di pseudo artrosi settiche e non
3. Infezioni ossee
4. Allungamenti
5. Artrodesi



Codice	Descrizione
5000305ST2	SEMIARCO Ø 80mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000307ST2	SEMIARCO Ø100mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000303ST2	SEMIARCO Ø120mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000301ST2	SEMIARCO Ø140mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000300ST2	SEMIARCO Ø160mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000302ST2	SEMIARCO Ø180mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000304ST2	SEMIARCO Ø200mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000306ST2	SEMIARCO Ø220mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE

ARCHI 5/8

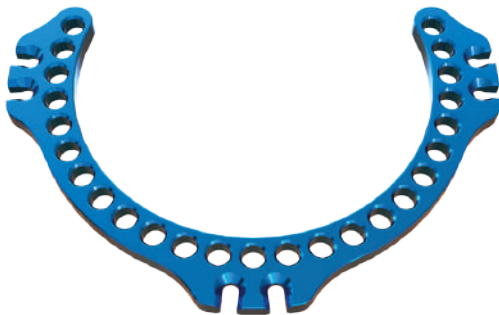

Codice	Descrizione
5006102ST	ARCO 5/8 Ø120mm STERILE
5006104ST	ARCO 5/8 Ø140mm STERILE
5006106ST	ARCO 5/8 Ø160mm STERILE
5006108ST	ARCO 5/8 Ø180mm STERILE
5006110ST	ARCO 5/8 Ø200mm STERILE
5006112ST	ARCO 5/8 Ø220mm STERILE



Codice	Descrizione
5000361ST	ARCO PIEDE Ø120mm STERILE
5000363ST	ARCO PIEDE Ø140mm STERILE
5000360ST	ARCO PIEDE Ø160mm STERILE
5000362ST	ARCO PIEDE Ø180mm STERILE
5000364ST	ARCO PIEDE Ø200mm STERILE

SETTORI



Codice	Descrizione
5006031ST	SETTORE Ø140mm STERILE
5006030ST	SETTORE Ø160mm STERILE
5006032ST	SETTORE Ø180mm STERILE
5006034ST	SETTORE Ø200mm STERILE
5006035ST	SETTORE Ø220mm STERILE




Codice	Descrizione
5000310ST2	BARRA FISSA 30mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000312ST2	BARRA FISSA 50mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000314ST2	BARRA FISSA 100mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000316ST2	BARRA FISSA 150mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE

BARRE MOBILI BILATERALI



Codice	Descrizione
5000320ST2	BARRA MOBILE BILATERALE 80-100mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000322ST2	BARRA MOBILE BILATERALE 100-145mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000324ST3	BARRA MOBILE BILATERALE 150-245mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE

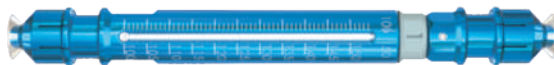


Codice	Descrizione
5006020ST2	BARRA MOBILE MONOLATERALE 65-80mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5006022ST2	BARRA MOBILE MONOLATERALE 80-110mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5006024ST2	BARRA MOBILE MONOLATERALE 100-150mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5006026ST2	BARRA MOBILE MONOLATERALE 150-250mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE

BARRE FILETTATE



Codice	Descrizione
5000380ST2	BARRA FILETTATA M 6X50mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000381ST2	BARRA FILETTATA M 6X75mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000382ST2	BARRA FILETTATA M 6X100mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000384ST2	BARRA FILETTATA M 6X150mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000385ST2	BARRA FILETTATA M 6X200mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000386ST2	BARRA FILETTATA M 6X250mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000388ST2	BARRA FILETTATA M 6X300mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000390ST2	BARRA FILETTATA M 6X400mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE

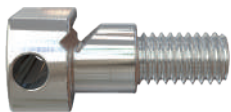

Codice	Descrizione
5000330ST2	MORSETTO FISSAFILI (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000330ST4	MORSETTO FISSAFILI (CONFEZIONE 4PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5000332ST	MORSETTO VITE SINGOLA STERILE



Codice	Descrizione
5000333ST	MORSETTO A 2 VITI STERILE
5000334ST	MORSETTO A 3 VITI STERILE

ACCESSORI



Codice

Descrizione

5000335ST

SUPPORTO X VITE/FILO A 1 FORO STERILE

5000336ST

SUPPORTO X VITE/FILO A 2 FORI STERILE

5000337ST

SUPPORTO X VITE/FILO A 3 FORI STERILE



Codice

Descrizione

50000352ST10

VITE SVASATA PER ARCHI (CONFEZIONE 10PZ) STERILE

30000456ST10


VITE SVASATA PER BARRE (CONFEZIONE 10PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5000340	FILO LISCIO Ø1,8 X 400mm
5000342	FILI DI K CON OLIVA Ø 1,8 X 400mm
5000340ST5	FILI LISCI Ø1,8X400mm (CONFEZIONE 5PZ) STERILE
5000342ST5	FILI OLIVA Ø1,8 X400mm (CONFEZIONE 5PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5000354ST20	DADO DA 10 (CONFEZIONE 20PZ) STERILE

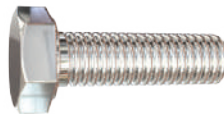

Codice	Descrizione
5000356ST10	BULLONI M6X20mm (CONFEZIONE 10PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5006040ST	DISTRATTORE PER BARRA FILETTATA STERILE



Codice	Descrizione
5006042ST	PIASTRINA ADATTAMENTO STERILE



Codice	Descrizione
5006044ST5	RONDELLA Ø1,3X2mm (CONFEZIONE 5PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5006045ST	SUPPORTO 45° - L 50mm STERILE
5006046ST	SUPPORTO 45° - L 100mm STERILE



Codice	Descrizione
5006050ST	CERNIERA DOPPIA STERILE



Codice	Descrizione
5006052ST2	SNODO EMISFERICO M6 (CONFEZIONE 2PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5006054ST2	SUPPORTO MULTIFUNZIONE (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5006055ST2	SUPPORTO MULTIFUNZIONE FEMMINA (CONFEZIONE 2PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5006056ST2	SUPPORTO ANGOLARE 90° (CONFEZIONE 2PZ) STERILE



Codice	Descrizione
5006058ST	SUPPORTO SISTEMA IBRIDO FEP/CF STERILE




Codice	Descrizione
5006506ST	SUPPORTO SISTEMA IBRIDO ER STERILE

ACCESSORI PER ARCHI PIEDE



Codice	Descrizione
5000370ST2	PROLUNGA ARCO PIEDE 5 FORI 76mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000372ST2	PROLUNGA ARCO PIEDE 7 FORI 106mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE
5000373ST2	PROLUNGA ARCO PIEDE 10 FORI 136mm (CONFEZIONE 2PZ) STERILE

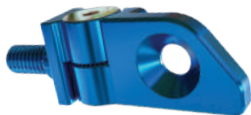

Codice	Descrizione
5000374ST	SNODO ARCO PIEDE STERILE

Codice	Descrizione
5000501H	VITE CORTICALE 6X100mm RIVESTIMENTO HA
5000502H	VITE CORTICALE 6X120mm RIVESTIMENTO HA
5000503H	VITE CORTICALE 6X140mm RIVESTIMENTO HA
5000504H	VITE CORTICALE 6X160mm RIVESTIMENTO HA
5000505H	VITE CORTICALE 6X180mm RIVESTIMENTO HA
5000531H	VITE CORTICALE 5X80mm RIVESTIMENTO HA
5000532H	VITE CORTICALE 5X100mm RIVESTIMENTO HA
5000533H	VITE CORTICALE 5X120mm RIVESTIMENTO HA
5000534H	VITE CORTICALE 5X140mm RIVESTIMENTO HA

STRUMENTARIO

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
5000124L	CHIAVE PER GRANI 3mm PROLUNGATA	5000222	PERFORATORE Ø3,5mm
5000124	CHIAVE PER GRANI SISTEMA TELESCOPICO	5000224	PERFORATORE Ø4,5mm
5006000	CHIAVE ESAGONALE A L DA 3mm	5000601	CHIAVE PER VITI Ø6mm
5006001	CHIAVE PIANA DA 10/10	5000602	CHIAVE PER VITI Ø5mm
5006002	CHIAVE PIANA DA 10/12	5000600	CHIAVE PER VITI Ø4mm
5006003	CHIAVE TUBOLARE A L DA 10mm	5006004	TENDIFILO TUBOLARE
5006010	CANNULA PERFORATORE Ø 3,5X110mm	5006005	TENDIFILO A PINZA
5006012	CANNULA PERFORATORE Ø 4,5X110mm	5006006	TRONCHESE X FILI
5006016	CASSETTA DI STERILIZZAZIONE	5006007	PINZA PIEGAFILI
5006018	CASSETTA DI STERILIZZAZIONE COMPLETA	5006014	ADATTATORE PER TENDIFILO

NOTE



SEDE LEGALE:

Via P. Gobetti 56 r - 16145 Genova

Tel. +39 010 30801 - Fax. +39 010 3080211

www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE:

Via Canestrello 2 - 36050 Monteviale (VI)

Tel. +39 0444 950100 - Fax. +39 0444 950133

www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it