

CLICKIT ER ELBOW

FISSATORE DA GOMITO

Kit sterile

Autocentrante

Morsetti ad attacco rapido

Distrazione articolare micrometrica



Indicazioni

- fratture articolari del gomito
- fratture e lussazioni instabili del gomito
- fratture dell'omero distale e/o del gomito associate a gravi lesioni alle parti molli

CARATTERISTICHE

Morsetti ad attacco rapido e corpo centrale autocentrante

Corpo snello e barre in carbonio

Corpo centrale con unità di distrazione

Universale

Sterile

VANTAGGI

Semplice applicazione

Leggero e ben tollerato

Distrazione articolare micrometrica e controllata

Sia dx che sx

Pronto all'uso

Componenti




Corpo fissatore

Autocentrante e con possibilità di distrazione articolare micrometrica e controllata



Morsetto attacco rapido

Raccorda barra Ø 8.0 con barra Ø 6.0 e barra Ø 8.0 con viti Ø 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0 mm

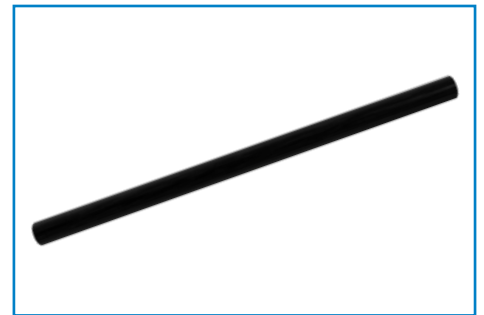

Barre

Radiotrasparenti, Ø 8.0 e 6.0 mm



Morsetto multiplo

Posizionamento di 2/3 viti complanari

Sterilizzazione


Il kit ClickIt ER Elbow è fornito sterile.

Per lo strumentario si consiglia la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo secondo i seguenti parametri:

TEMPERATURA: 134°

ESPOSIZIONE: 10 min

Kit ClickIt ER Elbow

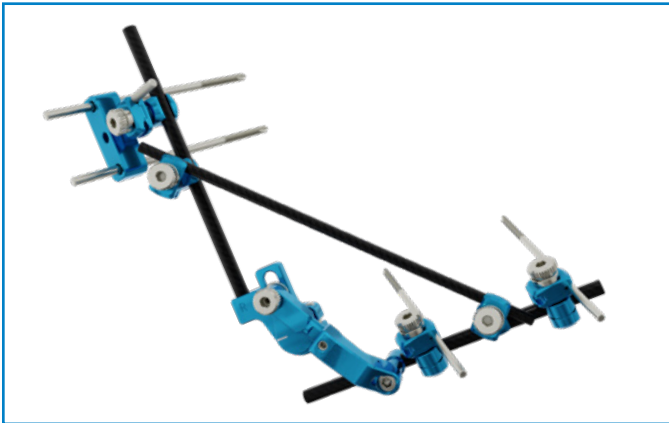

Descrizione	Q.tà
Barra in carbonio Ø 6.0 mm	1
Snodo centrale completo di barre e morsetto multiplo	1
Morsetto ClickIt ER Elbow	5
Viti corticali Ø 5.0 mm L 150, filetto 40 mm	2
Viti corticali Ø 4.0 mm L 150, filetto 40 mm	2

CLICKIT ER ELBOW 5006540ST

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5006539ST	Morsetto ClickIt ER Elbow
5006538ST	Snodo ClickIt ER Elbow
VA4.150.40	Vite corticale autoperforante 4x150, filetto 40 mm
VA4.150.55	Vite corticale autoperforante 4x150, filetto 55 mm
VA5.150.40	Vite corticale autoperforante 5x150, filetto 40 mm
VA5.150.55	Vite corticale autoperforante 5x150, filetto 55 mm
VA6.150.40	Vite corticale autoperforante 6x150, filetto 40 mm
VA6.150.55	Vite corticale autoperforante 6x150, filetto 55 mm

STRUMENTARIO *

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562	Cassetta di sterilizzazione strumentario ClickIt ER completa	
Composto da:		
5000621	Chiave a T universale	1
5006.04	Adattatore Ø 4.0 per chiave a T	1
5006.05	Adattatore Ø 5.0 per chiave a T	1
5006000	Chiave esagonale a L da 3.0 mm	1
5002074	Chiave esagonale a L da 5.0 mm	1
5006010	Cannula perforatore Ø 3.5 x 110 mm	1
5000222	Perforatore Ø 3.5 mm	1
5006560ER	Cassetta di sterilizzazione strumentario ClickIt ER vuota	1

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE



SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it